

Rinovanda 57

Calendula Spray

Nasale



Dipositivo Medico CE

Numero: 1168011



Soluzione rinologica in eco-spray coadiuvante specifico per alleviare i sintomi del naso chiuso. Indicata per il trattamento dei sintomi di

- Raffreddore
- Rinite
- Sinusite.

L'estratto di calendula grazie alla sua ricca composizione fitochimica (terpenoidi, flavonoidi, cumarine, chinoni, oli volatili, carotenoidi e aminoacidi) è in grado di svolgere molteplici attività farmacologiche:

- attività antinfiammatoria
- attività antibatterica
- attività antimicotica
- attività cicatrizzante

La soluzione nebulizzata nelle cavità nasali consente la formazione di un film muco-adesivo che svolge azione protettiva e idratante, prevenendo le irritazioni e riequilibrando le secrezioni nasali.



Composizione

Estratto di fiori di **Calendula Officinalis** (titolata al 5% in luteina), Acqua depurata, Glicerina vegetale, Sodio Cloruro, Sodio Fosfato.

Istruzioni per l'uso

Agitare il flacone prima dell'uso. Utilizzare l'apposito nebulizzatore somministrando da **1 a 2 erogazioni per narice**. A seconda dell'esigenza è possibile ripetere l'applicazione più volte durante la giornata.

Avvertenze

In caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti, evitare l'uso del prodotto. Un leggero pizzicore al momento dell'applicazione rappresenta una normale e innocua reazione momentanea. Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Le persone che hanno un'allergia accertata per le Asteraceae dovrebbero usare il prodotto con cautela.



Tecnologia

al servizio della Natura:
il massimo della "Natura"
grazie alla tecnologia APF


Naturale non è sinonimo di sicuro, per realizzare un prodotto sicuro e massimamente "naturale" è stata impiegata la più avanzata tecnologia attualmente disponibile. La tecnologia APF permette al Rinovanda 57 di configurarsi come uno spray nasale con le seguenti caratteristiche:

- Senza conservanti
- Senza propellenti
- Senza alcol
- Senza glicoli
- Senza glutine



RINOVANDA 57

CALENDULA SPRAY

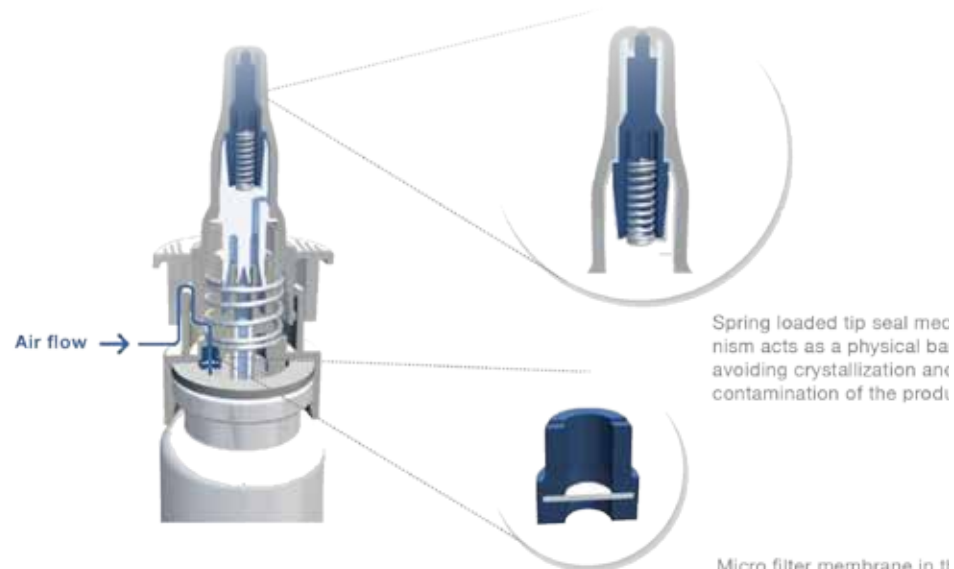


Spring loaded tip seal mechanism acts as a physical barrier avoiding crystallization and contamination of the product.

Micro filter membrane in the air flow prevents the product from contamination.


Il sistema di cessione APF (**Air Preservative Free**) è un packaging che impedisce la contaminazione della soluzione in quanto filtra l'aria in entrata attraverso una membrana con filtro di 0.2 micron che impedisce a qualsiasi microrganismo di penetrare all'interno e contaminare la soluzione mentre l'aria filtrata svolge il ruolo di naturale propellente per la nebulizzazione. L'APF consente dunque di evitare l'impiego di conservanti e propellenti artificiali, oltretutto garantisce un rilascio controllato (circa 100 microlitri a spruzzo, quindi una confezione eroga circa 200 spruzzi).

Priming/Re-priming performance:

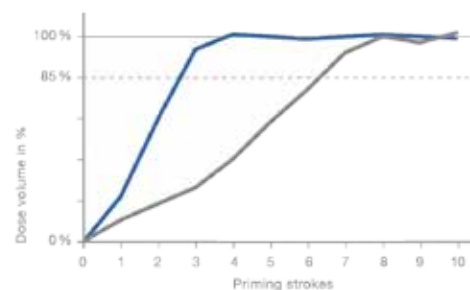

APF advantages:

- fast priming
- constant dose volume

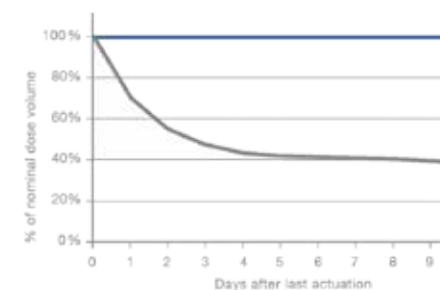

APF advantages:

- very low loss of weight
- no re-priming necessary



- Qualified with challenging microbiological tests:



TSIT
(Tip Seal Integrity Test)

Submersed actuation in *Pseudomonas aeruginosa* suspension.



CVIT
(Closure Ventilation Integrity Test)

Closure and filter challenge with *Bacillus atrophaeus* spores.



- Possibility of 360° application:



An unvented version of the APF allows dispensing in any position.

An inner multi-layer pouch containing the product slowly collapses while the APF 360° is being actuated.

This ensures most convenient handling e.g. for pediatric care.

Rinovanda 57

Calendula Spray Nasale

Metodo di produzione:

tripla filtrazione della soluzione fino a 0,2 micron

Metodo di confezionamento:

confezionamento in ambiente microbiologicamente controllato

Packaging

Tecnologia APT ("Preservative free")

Caratteristiche:

Senza conservanti, Senza Propellenti, Senza alcool,
Senza Glicoli, Senza Glutine

Confezione: 20 ml

Rilascio controllato:

spruzzo da 100 microlitri; 200 spruzzi per confezione.

Shelf life:

la durata del prodotto è pari alla data di scadenza anche in seguito al primo utilizzo



Tutte le materie prime impiegate sono
senza alcool, senza glicoli e senza glutine.





Rinovanda 57

Calendula Spray Nasale

La semplicità che è difficile a farsi

www.rinovanda.it

